

随手而动，见你想见，创新一直在继续...

Move with you, see you want to see, innovation has been going on...



HugeMed 麻醉视频喉镜

HugeMed可视化气道管理系统让医生轻松自如，让病人安全放心！



深圳市宏济医疗技术开发有限公司
Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co., LTD.

营销中心：深圳市罗湖区清水河一路腾邦大厦A座6楼
生产地址：深圳市龙岗区园山街道保安社区马五路1号2栋516-1,416-1
售后服务电话：400-690-1290
电话：0755-2227 5866 0755-8487 7356
邮箱：Sale@Hugemed.net 网址：www.hugemed.net

麻醉视频喉镜

VL3R系列

USB接口

- 充电和文件传输

自由旋转
(前后140°, 左右180°)

- 3.5寸高清全视角, 无眩光显示、防划伤, 方便用户观察喉内结构。

人体工学设计

- 手柄抑菌、舒适、便携

功能键

- 开/关机键
- 菜单键
- 向上键
- 向下键

拍照/录像按键

- 高分辨率的视频功能, 内置8G储存卡, 可扩展至32G, 记录在教学和插管过程中的所有操作。

重复性使用视频喉镜片

MAC 5 MAC 4 MAC 3 MAC 2 MAC 1



麻醉视频喉镜

VL3D系列

一次性使用视频喉镜片

MAC 2 MAC 3 MAC 4



产品优势

安全

- 显示屏采用防碎保护材质设计;
- 镜头采用独特防雾设计, 手柄采用抗菌设计;
- 一次性镜片采用灭菌包装提高使用安全, 可防止交叉感染;
- 重复性镜片采用独特的316L医用不锈钢, 抗弯强度极高, 无折断的风险, 通过IPX8防水等级测试, 可深水浸泡消毒。

快速

- 开机即可插管, 无需预热;
- 可快速更换多种规格镜片。

高清

- 采用3.5寸全视角, 无眩光显示屏, 提高观察视角, 视野宽广, 杜绝盲区;
- 采用200万像素CMOS摄像头, 声门清晰可见。

便捷

- 可重复充电锂电池设计, 单次充电可持续使用200分钟以上;
- 一键记录经典插管病例方便教学及研究。

经济

- 节约成本的一次性镜片设计;
- 316L医用不锈钢镜片可重复消毒使用。

困难气道轻松插管!

- 据卫生部数据统计, 目前在气管过程中困难插管发生率高达3%, 其产生的主要原因之一是由于目前气管插管喉镜在插管过程中对声门观察可视程度较差;
- 宏济麻醉可视喉镜可提供麻醉插管优质可视化图像致力解决困难插管。

缩短学习曲线提高麻醉插管成功率!

- 使用宏济麻醉可视喉镜经过适当短期培训, 可快速学会插管;
- 使用宏济麻醉可视喉镜可提高插管成功率。

气管插管用喉镜

VL3S系列

显示屏

- 前后/左右旋转角度: $\geq 120^\circ$, 采用进口3.5寸全视角高清显示屏, 6个功能按键, USB接口, HDMI接口连接大屏视野更开拓

快速装卸

- 快锁设计, 一秒完成安装拆卸, 稳固又效率

弯角控制

- 灵活控制上下角度, 精准定位

镜体

- 1:1同轴扭矩性能, 让操作更简单、流畅
- 插入管有效长度650mm/350mm

插入部

- 外径: 抗折易弯曲, 耐用、顺滑
2.8mm/3.0mm/3.9mm/4.0mm/5.2mm/5.8mm

摄像系统

- 一键拍照, 长按摄像便于参考与教学

吸引按钮

- 迅速连接, 顺畅吸引

手柄

- 凹凸线条防滑设计, 提高手持舒适度;
- 特殊医用材料耐腐蚀, 表面幼纹易清洁


工作通道

- ϕ 内径: 型号可选配
1.2mm/2.0mm/2.6mm/3.0mm

镜身前端

- 双向弯曲, 新一代COMS图像传感技术, LED高亮度光源, 耐腐蚀, 上/下弯曲角度: $\geq 160^\circ / \geq 130^\circ$

VL3S气道系列						VL3S耳鼻喉系列				
规格	M58	M52	M40	M39	M30	M28	M28-1	M39-1	M40-1	M52-1
内径	3.0mm	2.6mm	2.0mm	1.2mm	1.2mm	0	0	1.2mm	2.0mm	2.6mm
插入管	有效长度650mm						有效长度350mm			

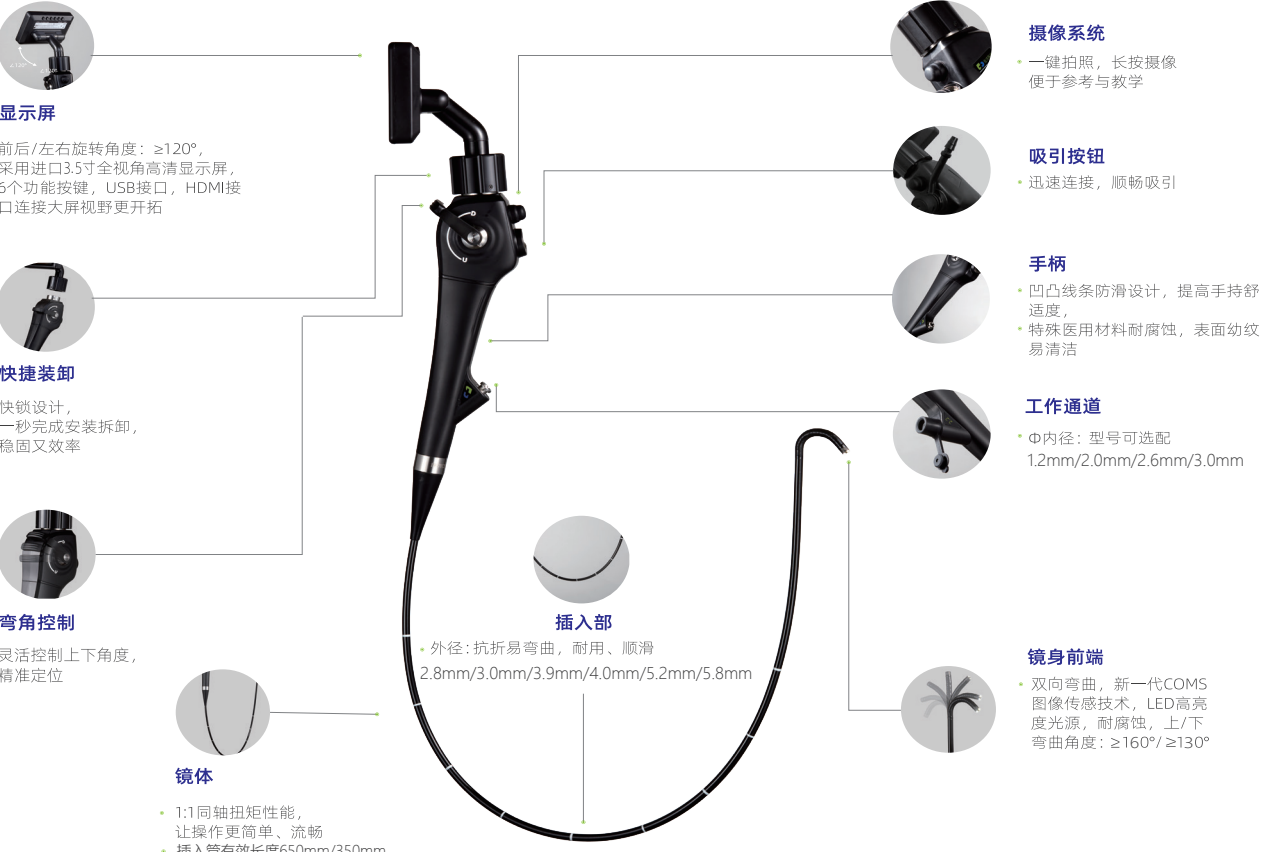

麻醉视频喉镜

VL3H系列

	重复性使用		一次性使用		
规格	N3065	N3965	H5055	H5065	H5075
管芯外径	3.0mm	3.9mm	5.0mm	5.0mm	5.0mm

管芯可随意塑型

- 镍钛合金记忆金属、可浸泡消毒
- 使用50-60°开水淋烫管芯复原

无交叉感染, 无需维护

- 插管同时支持吸痰、供氧
- 气管插管位置可任意锁定

显示屏

- 上下140°左右180°转动, 3.5寸全视角屏幕
- 内置8G储存卡, 可扩展至32G 拍照、录像储存档案

航空芯仔插端

- 使用寿命持久
- SUS304材质

16万像素, 高分辨率

- LED灯提供明亮的照明环境
- 蓝宝石玻璃封装

